

【一】品种说明

【来源】本品为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】取醋香附饮片 4000 g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 13%~22%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000 g，即得。

【性状】本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；气香，味苦。

【二】特征图谱


1、样品制备

制备方法	参照物溶液 取香附对照药材 2 g，置具塞锥形瓶中，加 70% 甲醇 25 mL，密塞，超声处理 45min，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取阿魏酸对照品适量，加 70% 甲醇制成每 1 mL 含 30 μg 的溶液，作为对照品参照物溶液。
	供试品溶液 取本品适量，研细，取约 0.5 g，置具塞锥形瓶中，加 70% 甲醇 25 mL，密塞，超声处理 45 分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

2、分析条件


色谱柱	Spursil® C18, 4.6 mm × 250 mm, 5 μm (Cat# 82006)		
流动相	A: 甲醇		B: 0.2% 磷酸溶液
	时间 / 分钟	A/%	B/%
	0~12	5 → 20	95 → 80
	12~30	20 → 30	80 → 70
	30~40	30 → 48	70 → 52
	40~50	48 → 56	52 → 44
	50~55	56 → 75	44 → 25
	55~65	75 → 90	25 → 10
流速	1.0 mL/min		
进样量	10 μL		
柱温	30 °C		
检测波长	325 nm		
仪器	岛津 LC-20A		

对照品图谱

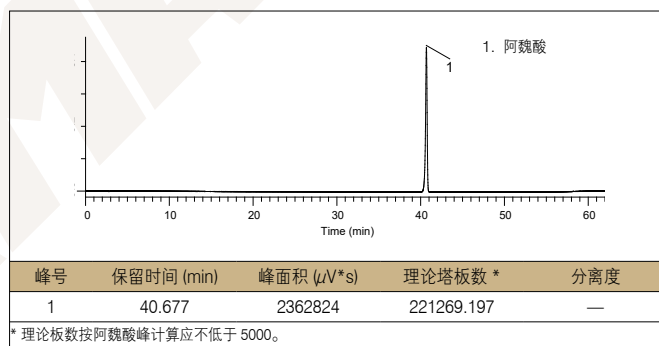


3、实验图谱

对照药材图谱

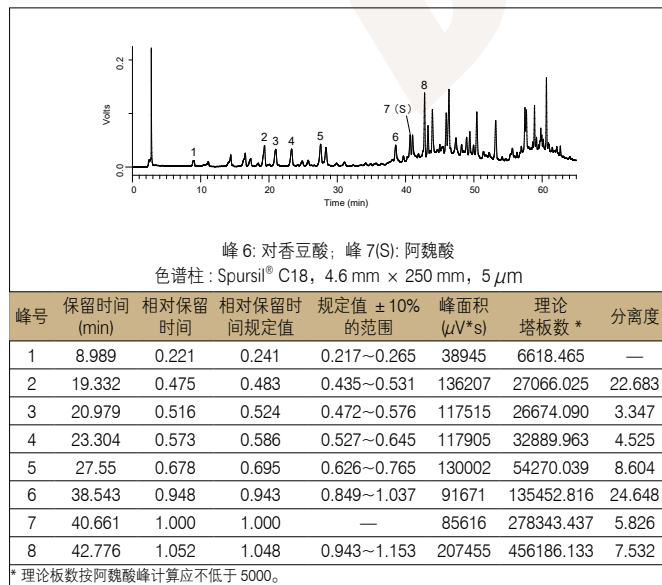

供试品图谱

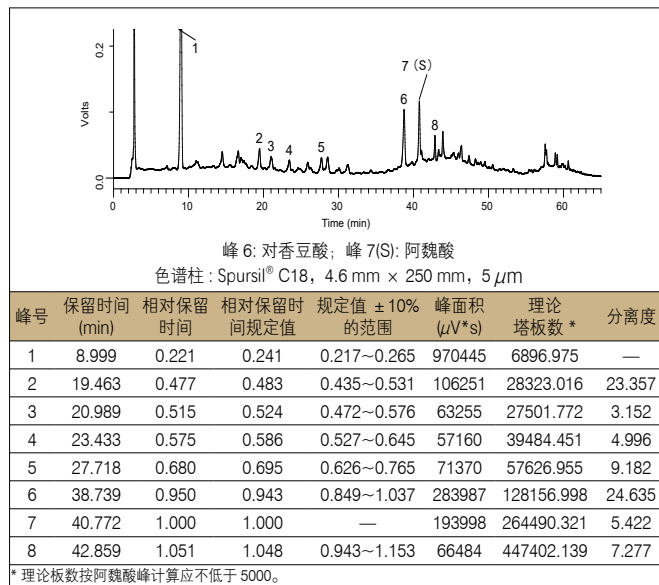

4、实验结果

使用色谱柱 Spursil® C18, 4.6 mm × 250 mm, 5 μm (Cat# 82006) 检测醋香附配方颗粒的特征峰，供试品色谱中呈现 8 个特征峰，并与对照药材参照物色谱中的 6 个特征峰保留时间相对应；计算峰 1、峰 2、峰 3、峰 4、峰 5、峰 6、峰 8 与 S 峰（阿魏酸）的相对保留时间分别为 0.221(峰 1)、0.477(峰 2)、0.515(峰 3)、0.575(峰 4)、0.680(峰 5)、0.950(峰 6)、1.051(峰 8)，在规定值的 ± 10% 范围之内，符合方法要求。